

マットレスとの適合表									
			91cm幅				83cm幅		
スタンダードマットレス	ストレッチスリムマットレス	[清拭]	レギュラー	KE-771SQ	00170-000740	オープン価格	KE-773SQ	00170-000742	オープン価格
			ミニ	KE-772SQ	00170-000741	オープン価格	KE-774SQ	00170-000743	オープン価格
		[通気]	レギュラー	KE-771TQ	00170-000742	オープン価格	KE-773TQ	00170-000747	オープン価格
			ミニ	KE-772TQ	00170-000746	オープン価格	KE-774TQ	00170-000748	オープン価格
	プレグラーマットレス		レギュラー	KE-551Q	00170-000159	¥44,000 (税抜)	KE-553Q	00170-000142	¥44,000 (税抜)
	ポケットコイルマットレス		ミニ	KE-5511Q	00170-000286	¥44,000 (税抜)	KE-5531Q	00170-000285	¥44,000 (税抜)
ハイスタンダードマットレス	ストレッチフィットマットレス	[清拭]	レギュラー	RB-ZA91P	00170-001063	¥74,000 (税抜)	RB-ZA83P	00170-001062	¥69,000 (税抜)
			ミニ	KE-761	00170-000043	¥42,000 (税抜)	KE-763	00170-000044	¥42,000 (税抜)
		[通気]	レギュラー	KE-781SQ	00170-000730	オープン価格	KE-783SQ	00170-000732	オープン価格
			ミニ	KE-782SQ	00170-000731	オープン価格	KE-784SQ	00170-000733	オープン価格
	エバーフィットC3マットレス	[清拭]	レギュラー	KE-781TQ	00170-000735	オープン価格	KE-783TQ	00170-000737	オープン価格
			ミニ	KE-782TQ	00170-000736	オープン価格	KE-784TQ	00170-000738	オープン価格
床ずれ防止マットレス	エバーフィットC3マットレス	[清拭]	レギュラー	KE-611SQ	00170-001037	¥67,000 (税抜)	KE-613SQ	00170-001039	¥67,000 (税抜)
			ミニ	KE-612SQ	00170-001038	¥67,000 (税抜)	KE-614SQ	00170-001040	¥67,000 (税抜)
		[通気]	レギュラー	KE-611TQ	00170-001042	¥72,000 (税抜)	KE-613TQ	00170-001044	¥72,000 (税抜)
			ミニ	KE-612TQ	00170-001043	¥72,000 (税抜)	KE-614TQ	00170-001045	¥72,000 (税抜)
		[ドライ]	レギュラー	KE-611UQ	00170-001033	¥72,000 (税抜)	KE-613UQ	00170-001035	¥72,000 (税抜)
			ミニ	KE-612UQ	00170-001034	¥72,000 (税抜)	KE-614UQ	00170-001036	¥72,000 (税抜)
	コンフォケアマットレス	[清拭]	レギュラー	KE-811	00170-000257	¥72,000 (税抜)	KE-813	00170-000258	¥72,000 (税抜)
	ストレッチグライドマットレス	[清拭]	レギュラー	KE-811	00170-000257	¥72,000 (税抜)	KE-813	00170-000258	¥72,000 (税抜)
			ミニ	KE-791SQ	00170-000720	オープン価格	KE-793SQ	00170-000722	オープン価格
		[通気]	レギュラー	KE-792SQ	00170-000721	オープン価格	KE-794SQ	00170-000723	オープン価格
			ミニ	KE-791TQ	00170-000725	オープン価格	KE-793TQ	00170-000727	オープン価格
	エバーブラウドマットレス	[清拭]	レギュラー	KE-792TQ	00170-000726	オープン価格	KE-794TQ	00170-000728	オープン価格
			ミニ	KE-621SQ	00170-000970	オープン価格	KE-623SQ	00170-000972	オープン価格
		[通気]	レギュラー	KE-622SQ	00170-000971	オープン価格	KE-624SQ	00170-000973	オープン価格
			ミニ	KE-621TQ	00170-000962	オープン価格	KE-623TQ	00170-000964	オープン価格
		[ドライ]	レギュラー	KE-622TQ	00170-000963	オープン価格	KE-624TQ	00170-000965	オープン価格
			ミニ	KE-621UQ	00170-000966	オープン価格	KE-623UQ	00170-000968	オープン価格
	アクアフロートマットレス	[清拭]	レギュラー	KE-622UQ	00170-000967	オープン価格	KE-624UQ	00170-000969	オープン価格
			ミニ	KE-831Q	00170-000505	¥120,000 (税抜)	KE-833Q	00170-000506	¥110,000 (税抜)
		[通気]	レギュラー	KE-841Q	00170-000507	¥125,000 (税抜)	KE-843Q	00170-000508	¥115,000 (税抜)
			ミニ	KE-8411Q	00170-000511	¥125,000 (税抜)	KE-8431Q	00170-000512	¥115,000 (税抜)
	マキシーフロートマットレス	[清拭]	レギュラー	KE-801A	00170-000045	¥87,000 (税抜)	KE-803A	00170-000046	¥87,000 (税抜)
	エアマットレス ここちあ風香	[清拭]	レギュラー	KE-951M	00170-000899	¥150,000 (税抜)	KE-953M	00170-000900	¥150,000 (税抜)
			ミニ	KE-971S	00170-001065	オープン価格	KE-973S	00170-001067	オープン価格
		[清拭]	レギュラー	KE-972S	00170-001066	オープン価格	KE-974S	00170-001068	オープン価格
			ミニ	KE-971T	00170-001069	オープン価格	KE-973T	00170-001071	オープン価格
	エアマットレス ここちあ利楽	[通気]	レギュラー	KE-971T	00170-001069	オープン価格	KE-973T	00170-001071	オープン価格
			ミニ	KE-972T	00170-001070	オープン価格	KE-974T	00170-001072	オープン価格
	エアマットレス ここちあ結起 3D	[清拭]	レギュラー	KE-931QS	00170-000845	¥210,000 (税抜)	KE-933QS	00170-000847	¥210,000 (税抜)
			ミニ	KE-932QS	00170-000846	¥210,000 (税抜)	KE-934QS	00170-000848	¥210,000 (税抜)

\*用途・目的に合わせて機能を追加したマットレス。  
※マットレスは**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り、**非課税**となります。



## 安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
最新の情報はホームページでご確認いただけます。

[www.paramount.co.jp](http://www.paramount.co.jp)

本カタログに記載した価格はすべて税抜表示です。別途消費税が加算されます。

## パラマウントベッド株式会社

製品のお問い合わせは	お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648	
	土・日・祝日も受付いたします。 受付時間：9:00～17:00 (年始1/1～1/3は休業いたします)	
本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎ (03) 3648-1111 (代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎ (03) 3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎ (011) 271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎ (022) 239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎ (048) 852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎ (042) 795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎ (052) 963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎ (06) 6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031 高松市郷東町223番1	☎ (087) 881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎ (082) 293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎ (092) 461-1131 (代)

製品のお求め、ご相談は…

- 記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

H20-C00668



as human, for human

PARAMOUNT BED



あなたにプラス、  
私にプラス。

ご本人様と介護に関わるすべての人を笑顔にしたい。

介護用ベッド 楽匠プラスシリーズ

楽匠<sub>プラス</sub>



(認証機関名)

工業標準化法に基づくJISマーク表示  
制度において次の登録認証機関が  
規格適合したことを認証した商品

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

パラマウントベッド株式会社

# 大切な人に、もっと寄り添い、力になる。

パラマウントベッドの楽匠プラスシリーズは、独自の先進技術を結集させた

ご本人様にとっても、介護する方にとっても、確かな力になる介護用ベッドです。

もっとスムーズな背あいで、もっと身体を起こす時間を快適に過ごすために、

身体の動きに合わせて新たに開発したプラス ライン ボトムを採用。

さらに、新しく搭載した家庭内呼び出し機能で、ご本人様と介護する方のつながりやすさも実現します。

ご本人様の自分らしい生活と、介護する方の笑顔のために、楽匠プラスシリーズが、もっとサポートします。



## もっと、もっと、 身体にやさしくするために

介護用ベッドでいちばん多く利用されている背あけ機能をさらに磨きあげています。新開発したプラス ライン ボトムをシリーズ全機種に採用することで、先進のラクリアモーションから背ボトムだけを動かすものまで、すべての背あけ機構がグレードアップしています（弊社従来品との比較）。



## もっと、 介護する方とつながるために

スマートフォン用の専用アプリも用意しました。家庭内呼び出し機能で、手元スイッチからスマートフォン\*に通知できます。また、スマートフォンでベッドの操作ができます（使い方は動画で確認できます）。もっとご家族とつながることで、よりよい介護をサポートします。

\*Bluetoothの無線が届く範囲で受信します。



## もっと、 一人ひとりに合わせるために

ご本人様の心身の状態や生活環境、好みなどに配慮した豊富なバリエーションを用意しています。ベッドの機能やサイズ、デザインの組み合わせにより、一人ひとりに合った1台が見つかります。

### JIS認証を取得

楽匠プラスシリーズは、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”についてJIS規格（JIS T 9254）に定められた寸法を遵守しています。また、その組み合わせについて在宅用電動介護用ベッドに関するJIS規格の認証を取得しています。




## もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。 背あげをさらに進化させるために生まれた プラス ライン ボトム。

要所要所に新しいアイデアを取り入れて開発したプラス ライン ボトムが新登場。  
より身体の動きに合った起きあがり動作で骨盤の立った動きやすい起きあがり姿勢を実現しています。  
ラクリアモーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。

### より姿勢を安定させやすい 背サポート

ここがプラス!


腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかり支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。

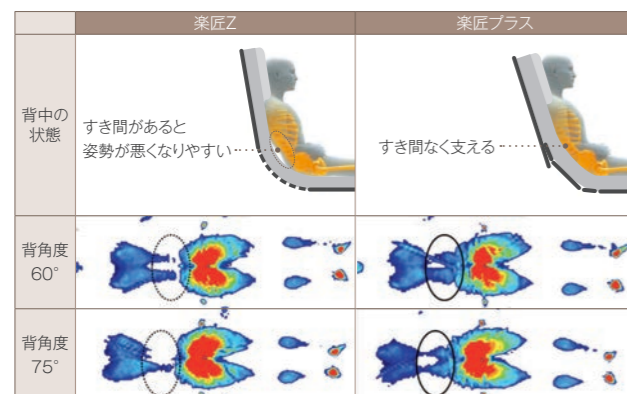

### より骨盤を立てやすい 腰サポート

ここがプラス!


骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。

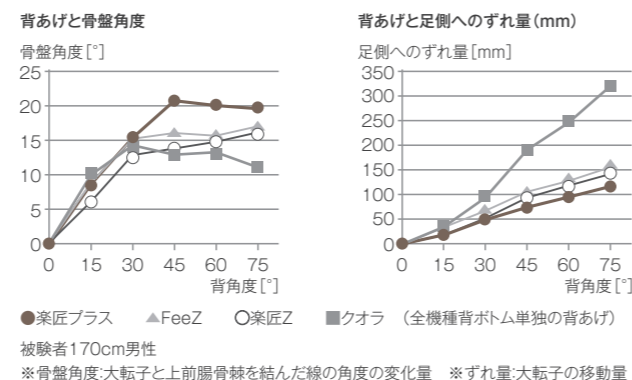

### 身体の軸とベッドの軸を合わせやすい 新しいボトム分割(腰ボトム)

ここがプラス!


腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、連動など膝あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

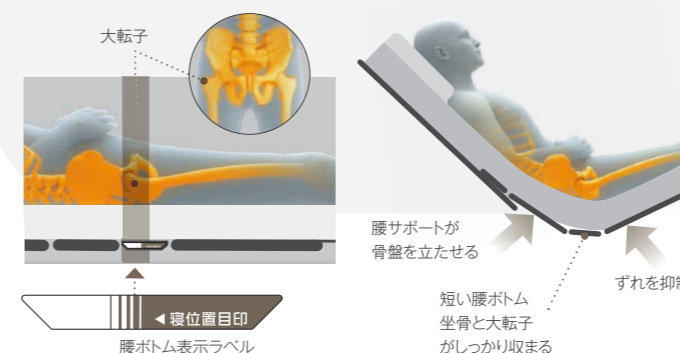

### 身長差をカバーする 膝サポート

ここがプラス!

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きにフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも良く馴染みやすくなっています。

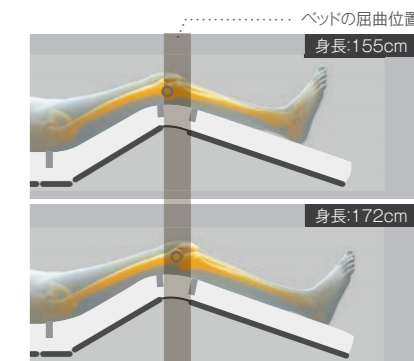


## プラス ライン ボトムだから、 楽匠プラスシリーズのすべての背あげ機構が さらにやさしくグレードアップ。

新開発のプラス ライン ボトムなら、パラマウントベッド独自の起きあがりプログラムも、もっと効果的に利用できます。

また、さまざまな離床方法を想定したバリエーションを用意。使い方に合わせて選べます。

楽匠プラスシリーズのラクリアモーションは、前機種と比較して、骨盤角度、身体のずれ量、上半身の曲がり具合において、いずれの評価も上回っています。プラス ライン ボトムにより、ラクリアモーションの効果も向上しています。

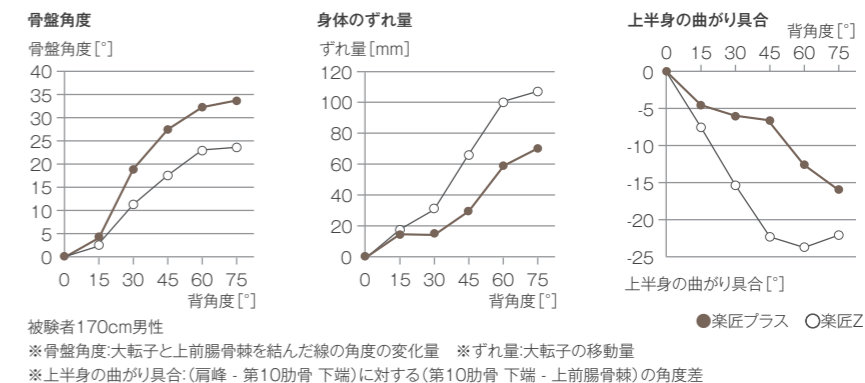

### 起きあがり動作 と 起きあがり姿勢

#### 背の動きに、膝のあげさげとベッドの傾斜を組み合わせた起きあがりプログラム



身体がずれないように、上体を起こしながら膝をあげます。



少し上体を起こしてから、ベッドを足側に傾斜させます。ベッドの傾斜を利用することで、上体を起こすときに生ずる身体とマットレスの位置関係の変化を抑えます。



傾斜が止まり、さらに上体を起こします。骨盤を起こし、仙骨部にかかる圧力をお尻と太ももに移していきます。



上体を起こしながら膝をさげます。骨盤が起きた状態で、膝を少し曲げて足先をさげた姿勢で起きあがるので、疲れにくく身体が動かしやすくなります。



骨盤が起きているので、背もたれに頼ることが少なく上体を前傾させやすく、首や肩、腕が動かしやすくなります。

### 離床姿勢

最低床高21cmからの起きあがり



床高36cmからの起きあがり



ここがプラス!

ラクリアモーションで起きあがると、足先がさがっているので、足が降りやすくなります。離床しやすいように、ラクリアモーションを操作するときのベッドの高さによってベッドの傾斜角度を自動的に調節して、起きあがったときの腰ボトムの高さを調節します。

ベッドの高さ	起きあがったときの腰ボトムの高さ
21～25cm	25cmになるように傾斜角度を自動調整
25～54cm	操作前の高さと同じになるように傾斜角度を自動調整
54cmより高い	54cm、傾斜確度は10°に移行

#### 背の動きに、膝のあげさげを組み合わせた起きあがりプログラム



身体がずれないように、上体を起こしながら膝をあげます。



上体を起こします。



上体を起こしながら、膝をさげます。膝をさげることで腹部の圧迫感を軽減します。



上体が起きたときには、足が水平に戻り長座位姿勢に移行します。身体のずれが少なく、骨盤が起きているので、起きあがり姿勢が安定しやすくなります。



安定した姿勢で起きあがれるので、身体が動かしやすくなります。

#### 背の動きに、膝のあげさげを組み合わせた起きあがりプログラム



身体がずれないように、上体を起こしながら膝をあげます。



上体を起こします。



ここがプラス!

上体を起こしながら、膝をさげます。膝をさげることで腹部の圧迫感を軽減します。背ボトムが約40°になると、膝ボトムが0°になります。

頭ボタンを押し続けると、背は最大の75°まであがり長座位姿勢に移行できます。



ここがプラス!

膝が水平に戻るタイミングが早いので、最後まで背をあげきらない状態で離床する方に配慮しています。

## 家庭内呼び出し機能を搭載。 手元スイッチで、 ご家族のスマートフォンに通知できます。

ここがプラス!

介護用ベッド初のスマートフォンを利用した家庭内呼び出し機能により、  
ご本人様と介護する方のつながりやすさを実現。

手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、ご家族のスマートフォンに通知します。

さらに、スマートフォンでベッドを操作することもできます。

接触頻度の高い手元スイッチを共有しないようにするなど、衛生面に配慮した使い方も可能です。

※このページに記載の機能を使用するには「ベッド操作アプリ」をダウンロードする必要があります。



### 手元スイッチから呼び出しが可能

手元スイッチは無線 (Bluetooth) でスマートフォンと通信できます。手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン\*に通知できます。

\*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールしたスマートフォンをベッドに登録する必要があります。ベッド1台に対してスマートフォンは3台まで登録できます。スマートフォンで通知を受信するにはスマートフォンの電源を入れておく必要があります。通知を受信したときの音やバイブレーション、画面表示などは、スマートフォンの機種や設定によって異なります。また、スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受信できない場合があります。詳しくは「ベッド操作アプリ」内のヘルプをご覧ください。

※ベッドからの家庭内呼び出し機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。



### スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォンで、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。一人ひとりの使いやすさに配慮しています。



■ コントローラー画面

今お使いの手元スイッチと同じ内容のボタンを、スマートフォンの画面上で選択できます。  
▲▼を長押しすると、手元スイッチと同様のベッド操作ができます。イラストの姿勢は実際のポジションに合わせて動き、スイッチの長押し中はバイブレーションが作動します。  
※コントローラーの表示画面は、ベッドの機種によって異なります。



■ メモリー画面

ボタンを選択すると、あらかじめ設定したポジションに移行できます。例えば介護する方が代わっても、良く使うポジションを正確に再現できます。より多くの方が操作しやすいように、大きめのボタンを採用しています。



■ セレクト画面

連動、頭、足、高さのアイコンをタッチすると操作したい部位が選択され、▲▼を長押しすると操作できます。より多くの方が操作しやすいように、大きめのボタンを採用しています。

### ベッドの操作を動画で確認

楽匠プラスシリーズの使い方を閲覧できます。手元スイッチのボタンごとに1つの動画で説明しているため、初めてお使いになる方もベッドの使い方を理解しやすくなります。



パラマウントベッドの「ベッド操作アプリ」は、  
こちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。  
アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります、お客様のご負担となります。Apple IDや Google アカウ  
ントは、お客様自身でご確認ください。



福祉用具貸与事業者様に向けたアプリも用意しています → 18 ページ

※Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google およびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## パラマウントベッドらしさ、それは、ご本人様と介護する方双方にとっての使いやすさです。

介護用ベッドがどんなに進化を遂げても“ご本人様や介護する方が、どんな時でも安心して使えるように”という考え方は変わりません。細部に至るまでその思いを行き届かせたパラマウントベッドらしさをご紹介します。



■ 大きくはっきりとした文字で表示する表示パネル

ベッドの角度や高さの数値を見やすく表示します。

■ 操作する内容ごとに色分けされた大型ボタン

あげ下げボタンを識別できるように突起を設け、ボタンを押したときには電子音を発するなど、目と指と耳で確認できるように工夫しています。

■ メモリーポジション機能

「メモリー」のボタン ① ② にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを登録できます。例えば介護する方が代わっても、正確なポジション再現が可能です。

※1モーターシリーズを除く。

### より多くの方が使いやすい手元スイッチ

手になじみやすく持ちやすい大きさや形状の手元スイッチです。大型のフックを設けており、ベッドサイドレールなどに掛けて使用できます。また、握力の弱い方などにも配慮して、さまざまな持ち方に対応できるように配慮しています。

### 介護のしやすさに配慮

#### 介護しやすい高さを設定できる


ベッドを最大64.5cm\*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。また楽匠プラスシリーズの高さ調節は、ベッドが前後に動かない垂直昇降方式です。端座位を取っているときにあげ下げしても姿勢が安定しやすくなります。

\*ゆかからボトム上面までの高さ(マットレスの厚みは含みません)。Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。1モーターシリーズ(背あげ)は高さ調節ができません。なお、脚座を付け替えることで最低床高を2段階に調整することは可能です。



#### 足先の角度調節機能

膝あげをするときに足先を高くすることができます。足先の角度は2段階に切り替えられます。「歩きにくい」「靴や靴下がはきにくい」など離床の障害ともなる足のむくみにも配慮しています。

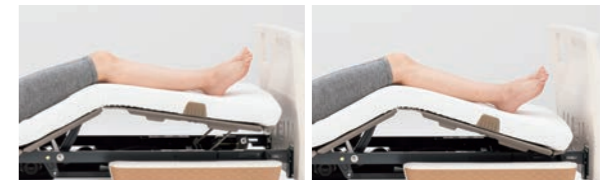

### 安全・安心に配慮

#### 最低床高15cmの超低床にも対応

ここがプラス!

楽匠プラスシリーズは、最低床高21cmと低く抑えた設計です。さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも導入しやすいように配慮しています。



#### 停電時や緊急時にベッドを操作できるスマートハンドル(別売)

災害などによる停電、ベッドの故障などの緊急時に、ハンドル操作でベッドポジションを調節できるスマートハンドルを用意しています。電動ベッドにスマートハンドルを接続しハンドルを回すことで、操作に必要な電気を供給できます。

※背(あげ・下げ)、膝(あげ・下げ)、高さ(上げ)を操作できます。

※Hタイプには、スマートハンドル付属モデルを用意しています。▶13・14ページ、17ページ



#### 高頻度接触部位の衛生面に配慮

ボードやサイドレール(別売)などの接触頻度の高い部位は耐薬品性に優れた材質を使用しており、清拭消毒(薬品などで拭く)に対応しています。衛生管理や感染対策のしやすさにも配慮しています。

用途に合わせて豊富なオプション製品を用意しています。詳しくは 15～17 ページをご覧ください。



使いやすさと安心感をカタチに。  
より心地のよい環境づくりをサポートします。

ご本人様の生活環境や好みに、新しい介護用ベッドがずっと馴染むように。

お部屋に合わせやすいカラーバリエーションや、身の回りの小物の収納に便利な棚ユニットを用意しています。

## 選べる2種類のボード

### ■ 多機能ボード

伝い歩きなどに便利なグリップを設けています。グリップはベッドの内側からもつかまれる形状にしてあり、ご本人様が寝位置を調整するときにも利用できる形状です。収納カバーは前機種から幅を17cm、高さを8cm拡大、標準サイズ(M)のスライディングボードが収まります。収納カバーの下部には、収納物の有無がわかる半透明の材質を採用しています。



### ■ 棚付きボード


スマートフォンや、メガネ、リモコンなどを置ける棚を追加したボードです。スマートフォンなどの充電に使える電源コンセントも設けています。夜間の介護などに利用できる照明も付いており、寝ているご本人様の目に直接光が入らないよう取り付けられています。棚付きボードは頭側・足側いずれにも取り付けられます。また、収納カバーも頭側、足側いずれにも付け替え可能です。

※棚付きボードを選んだ場合、ボードはキルト調シートのないホワイトアイボリーになります。



## 自然を身近に感じさせるアースカラーのバリエーション

「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリアの考え方を取り入れたアースカラーのデザインを展開。レザー柄のキルト調シートでモスグリーン、キャメル、グレイジュの3色とシートのないホワイトアイボリー、計4種類のカラーを用意しています。キルト調シートは、クッション性があり本革のような上質で自然な感触に、傷の付きにくい高い耐久性を備えています。

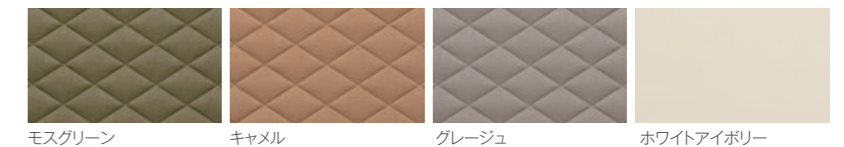

### もうひとつの癒しを。——バイオフィリックデザイン——

自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理的な効果が期待できるとして、オフィススペースや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。

## 504通りの組み合わせを用意しています。

起きあがりプログラムなどのベッドの機能、仕様やカラーなどを組み合わせることで、一人ひとりに合った1台が見つかります。

1台のベッドで、  
レギュラー・ミニのサイズ変更が可能































楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。



レギュラー



ミニ

ベッドの機能		適合する マットレス (幅)	ボード	停電対策	カラー								
					モスクリーン		キャメル		グレージュ		ホワイトアイボリー		
					製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード	
Hタイプ	3モーションシリーズ	 ラクリア モーション  らくらく モーション  背あげ 0~75°  膝あげ 0~30°  高さ調節 21~64.5cm  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A6311	00170-001315	KQ-A6322	00170-001328	KQ-A6333	00170-001338	KQ-A6300	00170-001314
				スマートハンドル付属	KQ-A6311S	00170-001317	KQ-A6322S	00170-001329	KQ-A6333S	00170-001339	KQ-A6300S	00170-001316	
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A6317	00170-001323	KQ-A6327	00170-001332	KQ-A6337	00170-001340	KQ-A6307	00170-001322
				スマートハンドル付属	KQ-A6317S	00170-001325	KQ-A6327S	00170-001333	KQ-A6337S	00170-001341	KQ-A6307S	00170-001324	
			91cm	多機能ボード	—	KQ-A6111	00170-001315	KQ-A6122	00170-001328	KQ-A6133	00170-001338	KQ-A6100	00170-001314
				スマートハンドル付属	KQ-A6111S	00170-001317	KQ-A6122S	00170-001329	KQ-A6133S	00170-001339	KQ-A6100S	00170-001316	
	2モーションシリーズ	 運動  背あげ 0~75°  膝あげ 0~20° (背膝運動)  高さ調節 21~64.5cm  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A5311	00170-001287	KQ-A5322	00170-001300	KQ-A5333	00170-001310	KQ-A5300	00170-001286
				スマートハンドル付属	KQ-A5311S	00170-001289	KQ-A5322S	00170-001301	KQ-A5333S	00170-001311	KQ-A5300S	00170-001288	
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A5317	00170-001295	KQ-A5327	00170-001304	KQ-A5337	00170-001312	KQ-A5307	00170-001294
				スマートハンドル付属	KQ-A5317S	00170-001297	KQ-A5327S	00170-001305	KQ-A5337S	00170-001313	KQ-A5307S	00170-001296	
			91cm	多機能ボード	—	KQ-A5111	00170-001287	KQ-A5122	00170-001300	KQ-A5133	00170-001310	KQ-A5100	00170-001286
				スマートハンドル付属	KQ-A5111S	00170-001289	KQ-A5122S	00170-001301	KQ-A5133S	00170-001311	KQ-A5100S	00170-001288	
Xタイプ (超低床対応)	3モーターシリーズ	 らくらく モーション  背あげ 0~75°  膝あげ 0~30°  高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm <sup>*</sup> )  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A3311	00170-001259	KQ-A3322	00170-001265	KQ-A3333	00170-001270	KQ-A3300	00170-001258
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A3317	00170-001263	KQ-A3327	00170-001267	KQ-A3337	00170-001271	KQ-A3307	00170-001262
	2モーションシリーズ	 運動  背あげ 0~75°  膝あげ 0~20° (背膝運動)  高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm <sup>*</sup> )  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A4311	00170-001273	KQ-A4322	00170-001279	KQ-A4333	00170-001284	KQ-A4300	00170-001272
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A4317	00170-001277	KQ-A4327	00170-001281	KQ-A4337	00170-001285	KQ-A4307	00170-001276
	2モーターシリーズ	 背あげ 0~75°  膝あげ 0~14° (背膝運動)  高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm <sup>*</sup> )  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A2311	00170-001245	KQ-A2322	00170-001251	KQ-A2333	00170-001256	KQ-A2300	00170-001244
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A2317	00170-001249	KQ-A2327	00170-001253	KQ-A2337	00170-001257	KQ-A2307	00170-001248
	1モーターシリーズ (背あげ)	 背あげ 0~75°  膝あげ 0~14° (背膝運動)  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A1311	00170-001231	KQ-A1322	00170-001237	KQ-A1333	00170-001242	KQ-A1300	00170-001230
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A1317	00170-001235	KQ-A1327	00170-001239	KQ-A1337	00170-001243	KQ-A1307	00170-001234
	1モーターシリーズ (高さ)	 高さ調節 21~64.5cm (15cm~58.5cm <sup>*</sup> )  手元スイッチ 表示/パネル付き	91cm	多機能ボード	—	KQ-A0311	00170-001217	KQ-A0322	00170-001223	KQ-A0333	00170-001228	KQ-A0300	00170-001216
			83cm	柵付きボード	—	KQ-A0317	00170-001221	KQ-A0327	00170-001225	KQ-A0337	00170-001229	KQ-A0307	00170-001220


\*1 脚座を超低床位置に取り付けた場合の高さです。  
\*2 1モーターシリーズ(背あけ)のボトムの高さは、脚座を低床の向きに取り付けた場合は21cmで、超低床の向きに取り付けた場合は15cmで固定になります。  
\*3 柵を頭側に取り付けた場合の高さです。  
※全機種オープン価格です。 ※1モーターシリーズ(高さ)を除き、非課税となります。  
※スマートハンドル付属機種は、JIS認証を取得したベッドとスマートハンドルKQ-P70Sをセットにして販売するものであり、セットで認証を取得したものではありません。

寸法表			
		91cm幅	83cm幅
		<b>A</b> 99.4cm(格納 92.4cm) <b>B</b> 212.4cm(ミニ 201.4cm) <b>C</b> 脚座中心間133.5cm 脚座外~外160.1cm <b>D</b> 21~64.5cm <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm	<b>A</b> 92.4cm <b>B</b> 212.4cm(ミニ 201.4cm) <b>C</b> 脚座中心間133.5cm 脚座外~外160.1cm <b>D</b> 21~64.5cm <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm
Hタイプ	多機能ボード	<b>A</b> 99.4cm(格納 92.4cm) <b>B</b> 218.9cm(ミニ 207.9cm) <b>C</b> 脚座中心間133.5cm 脚座外~外160.1cm <b>D</b> 21~64.5cm <b>E</b> 42.3cm*3 <b>F</b> 40.6cm*3	<b>A</b> 92.4cm <b>B</b> 218.9cm(ミニ 207.9cm) <b>C</b> 脚座中心間133.5cm 脚座外~外160.1cm <b>D</b> 21~64.5cm <b>E</b> 42.3cm*3 <b>F</b> 40.6cm*3
	柵付きボード	<b>A</b> 99.4cm(格納 92.4cm) <b>B</b> 212.4cm(ミニ 201.4cm) <b>C</b> 脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm <b>D</b> 21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm	<b>A</b> 92.4cm <b>B</b> 212.4cm(ミニ 201.4cm) <b>C</b> 脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm <b>D</b> 21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm
Xタイプ (超低床対応)	多機能ボード	<b>A</b> 99.4cm(格納 92.4cm) <b>B</b> 218.9cm(ミニ 207.9cm) <b>C</b> 脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm <b>D</b> 21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm*3	<b>A</b> 92.4cm <b>B</b> 212.4cm(ミニ 201.4cm) <b>C</b> 脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm <b>D</b> 21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm*3
	柵付きボード	<b>A</b> 99.4cm(格納 92.4cm) <b>B</b> 218.9cm(ミニ 207.9cm) <b>C</b> 脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm <b>D</b> 21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm*3	<b>A</b> 92.4cm <b>B</b> 218.9cm(ミニ 207.9cm) <b>C</b> 脚座中心間125.1cm 脚座外~外134.1cm <b>D</b> 21*2~64.5cm (超低床15*2~58.5cm) <b>E</b> 40.6cm <b>F</b> 40.6cm*3

①全長  
②全幅  
③ボードの高さ  
④ボトムの高さ  
⑤脚座中心間  
⑥脚座外~外の長さ  
⑦ボードの高さ

## オプション

抜き差しがしやすく、  
使いやすいサイドレールです。

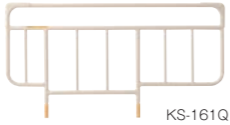

KS-161Q

ベッドサイドレール		JIS 認証取得	
スタンダード タイプ	KS-161Q	2本組 ホワイタイボリー	00170-000527 ￥17,000 (税抜)
	KS-166	2本組 ページュ	00170-000528 ￥17,000 (税抜)
	KS-171Q	2本組 ホワイタイボリー	00170-000529 ￥17,000 (税抜)
	KS-176	2本組 ページュ	00170-000530 ￥17,000 (税抜)
	KS-191Q	1本 ホワイタイボリー	00170-000752 ￥13,000 (税抜)
木目 タイプ	KS-126B	2本組 ビーチ	00170-000531 ￥23,000 (税抜)
	KS-126C	2本組 チェリー	00170-000532 ￥23,000 (税抜)
	KS-126M	2本組 ミディアム	00170-000806 ￥23,000 (税抜)
	KS-126W	2本組 ウォールナット	00170-000533 ￥23,000 (税抜)
	KS-146B	2本組 ビーチ	00170-000534 ￥23,000 (税抜)
	KS-146C	2本組 チェリー	00170-000535 ￥23,000 (税抜)
	KS-146M	2本組 ミディアム	00170-000807 ￥23,000 (税抜)
	KS-146W	2本組 ウォールナット	00170-000536 ￥23,000 (税抜)

●寸法：[KS-161Q、KS-166] (全長)96.4×(全高)50.3cm  
[KS-171Q、KS-176] (全長)96.4×(全高)56.3cm  
[KS-191Q] (全長)82.7×(全高)50.3cm  
[KS-126B、KS-126C、KS-126M、KS-126W] (全長)96.4×(全高)50.5cm  
[KS-146B、KS-146C、KS-146M、KS-146W] (全長)96.4×(全高)56.5cm

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

樹木のフォルムをイメージした  
サイドレールです。軽量で、触ったときに  
冷たさを感じさせにくい材質です。  
清拭しやすく、丸洗いでできます。



KS-111Q

ベッドサイドレール 軽量タイプ		JIS 認証取得	
KS-111Q	1本	ホワイトアイボリー	00170-001346 ￥15,000 (税抜)
KS-116Q	1本	ブロンズグレー	00170-001347 ￥15,000 (税抜)

●寸法：(全長)98.0×(全高)53.5

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

手・足などがすき間から  
出てしまうことを防ぐソフトカバー付きです。



KS-161QC

ソフトカバー付ベッドサイドレール		JIS 認証取得	
スタンダード タイプ	KS-161QC	2本組 ホワイタイボリー	00170-000539 ￥30,000 (税抜)
	KS-166QC	2本組 ページュ	00170-000540 ￥30,000 (税抜)
	KS-171QC	2本組 ホワイタイボリー	00170-000541 ￥30,000 (税抜)
	KS-176QC	2本組 ページュ	00170-000542 ￥30,000 (税抜)
	KS-191QC	1本 ホワイタイボリー	00170-000763 ￥19,500 (税抜)
木目 タイプ	KS-126BC	2本組 ビーチ	00170-000544 ￥36,000 (税抜)
	KS-126CC	2本組 チェリー	00170-000545 ￥36,000 (税抜)
	KS-126MC	2本組 ミディアム	00170-000808 ￥36,000 (税抜)
	KS-126WC	2本組 ウォールナット	00170-000546 ￥36,000 (税抜)
	KS-146BC	2本組 ビーチ	00170-000547 ￥36,000 (税抜)
	KS-146CC	2本組 チェリー	00170-000548 ￥36,000 (税抜)
	KS-146MC	2本組 ミディアム	00170-000809 ￥36,000 (税抜)
	KS-146WC	2本組 ウォールナット	00170-000549 ￥36,000 (税抜)

●寸法：[KS-161QC、KS-166QC] (全長)97.5×(全高)51cm  
[KS-171QC、KS-176QC] (全長)97.5×(全高)57cm  
[KS-191QC] (全長)85.3×(全高)51.5cm  
[KS-126BC、KS-126CC、KS-126MC、KS-126WC] (全長)97.5×(全高)51cm  
[KS-146BC、KS-146CC、KS-146MC、KS-146WC] (全長)97.5×(全高)57cm

※ソフトカバーは単体でもお求めいただけます。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

視認性を確保しながら、  
すき間をふさぐクリアカバー付きです。



KS-166QT

クリアカバー付ベッドサイドレール		JIS 認証取得	
スタンダード タイプ	KS-161QT	2本組 ホワイタイボリー	00170-000594 ￥25,000 (税抜)
	KS-166QT	2本組 ページュ	00170-000595 ￥25,000 (税抜)
	KS-171QT	2本組 ホワイタイボリー	00170-000596 ￥25,000 (税抜)
	KS-176QT	2本組 ページュ	00170-000597 ￥25,000 (税抜)
	KS-191QT	1本 ホワイタイボリー	00170-000764 ￥17,000 (税抜)
木目 タイプ	KS-126BT	2本組 ビーチ	00170-000815 ￥31,000 (税抜)
	KS-126CT	2本組 チェリー	00170-000816 ￥31,000 (税抜)
	KS-126MT	2本組 ミディアム	00170-000818 ￥31,000 (税抜)
	KS-126WT	2本組 ウォールナット	00170-000817 ￥31,000 (税抜)
	KS-146BT	2本組 ビーチ	00170-000819 ￥31,000 (税抜)
	KS-146CT	2本組 チェリー	00170-000820 ￥31,000 (税抜)
	KS-146MT	2本組 ミディアム	00170-000822 ￥31,000 (税抜)
	KS-146WT	2本組 ウォールナット	00170-000821 ￥31,000 (税抜)

●寸法：[KS-161QT、KS-166QT] (全長)96.4×(全高)50.3cm  
[KS-171QT、KS-176QT] (全長)96.4×(全高)56.3cm  
[KS-191QT] (全長)82.7×(全高)50.3cm  
[KS-126BT、KS-126CT、KS-126MT、KS-126WT] (全長)96.4×(全高)50.5cm  
[KS-146BT、KS-146CT、KS-146MT、KS-146WT] (全長)96.4×(全高)56.5cm

※クリアカバーは単体でもお求めいただけます。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

クッション性の高いウレタンフォーム入り  
ビニルレザー張りカバー付き。




KS-019A

ソフトガードサイドレール		JIS 認証取得	
KS-019A	1本		00170-000538 ￥26,000 (税抜)

●寸法：(全長)102×(全高)59cm

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

テレビのリモコンなどの  
整理整頓に便利なポケット付きです。

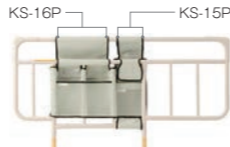

KS-16P

KS-15P

サクッとポケット付きベッドサイドレール		JIS 認証取得	
KS-161QAP	2本組	00170-000576	￥19,300 (税抜)
KS-161QBP	2本組	00170-000577	￥19,600 (税抜)
KS-161QCP	2本組	00170-000578	￥21,900 (税抜)
KS-171QAP	2本組	00170-000579	￥19,300 (税抜)
KS-171QBP	2本組	00170-000580	￥19,600 (税抜)
KS-171QCP	2本組	00170-000581	￥21,900 (税抜)
KS-191QAP	1本	00170-000765	￥15,300 (税抜)
KS-191QBP	1本	00170-000766	￥15,600 (税抜)
KS-191QCP	1本	00170-000767	￥17,900 (税抜)

●寸法：[KS-161QAP、KS-161QBP、KS-161QCP] (全長)96.4×(全高)50.3cm  
[KS-171QAP、KS-171QBP、KS-171QCP] (全長)96.4×(全高)56.3cm  
[KS-191QAP、KS-191QBP、KS-191QCP] (全長)82.7×(全高)50.3cm

※サクッとポケットは単体でもお求めいただけます。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

ベッドサイドレールによる精神的な拘束感を軽減します。



KA-037BR

サイドサポート(オプション受差込式)		JIS 認証取得	
KA-037AR	ページュ	00170-000555	￥12,000 (税抜)
KA-037BR	ブラウン	00170-000557	￥12,000 (税抜)
KA-037AL	ページュ	00170-000556	￥12,000 (税抜)
KA-037BL	ブラウン	00170-000558	￥12,000 (税抜)

●寸法：(長)63×(幅)12×(高)21cm(差し込み部を除く)

※オプション受差込式のサイドサポートには取り付け位置に制限があります。

ベッドからの立ちあがり動作を  
しっかりと支える、握りやすい介助バーです。



KS-099A

スイングアーム介助バー		JIS 認証取得	
KS-098A	1本	ホワイトアイボリー	00170-000898 ￥52,000 (税抜)
KS-099A	1本	ホワイトアイボリー	00170-001205 ￥52,000 (税抜)
KS-099B	1本	ブロンズグレー	00170-001206 ￥52,000 (税抜)

◎ベッドの左右どちらにも、工具なしで取り付けられます。

●寸法：[KS-098A] (全長)112.1×(全高)52.6cm

[KS-099A、KS-099B] (全長)112.0cm×(全高)52.1cm

※スイングアーム介助バーとベッドの同一側面で併用できるのは、KS-191Q、KS-151Q、KS-030Aのみです。

アーム部のすき間をふさぎ、

接触したときの衝撃を緩和するソフトカバー付きです。

ソフトカバー付きスイングアーム介助バー		JIS 認証取得	
KS-098ACL	1本	ホワイトアイボリー	00170-000901 ￥58,500 (税抜)

※ソフトカバーは単体でもお求めいただけます。

※KS-098ACLとベッドの同一側面で併用できるのは、KS-191Q、KS-151Q、KS-030Aのみです。

開閉部のないコンパクトな  
ベッド用手すりです。



KS-030A

サイドグリップ		JIS 認証取得	
KS-030A	1本	ホワイトアイボリー	00170-000897 ￥29,000 (税抜)

◎ベッドの左右どちらにも、工具なしで取り付けられます。

※ベッドの同一側面では、KS-030Aを単独または2本並べて、もしくはKS-098A、KS-191QKS-151Qと組み合わせてお使いください。

●寸法：(長)82.2×(高)52.3cm

サイドグリップの内部のすき間の一部を覆うソフトカバー付きです。

ソフトカバー付きサイドグリップ		JIS 認証取得	
KS-030AC	1本	ホワイトアイボリー	00170-000902 ￥34,500 (税抜)

※ソフトカバーは単体でもお求めいただけます。

※ベッドの同一側面では、KS-030ACを単独または2本並べて、もしくはKS-098A、KS-191Q、KS-151Qと組み合わせてお使いください。



KS-030AC

ベッドサイドレール		JIS 認証取得	
KS-151Q	1本	ホワイトアイボリー	00170-000537 ￥15,000 (税抜)

●寸法：(長)59cm、(全高)50.3cm

※スイングアーム介助バー、サイドグリップとの組み合わせ専用。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

ソフトカバー付きベッドサイドレール		JIS 認証取得	
KS-151QC	1本		00170-000543 ￥21,500 (税抜)

※ソフトカバーは単体でもお求めいただけます。

※スイングアーム介助バー、サイドグリップとの組み合わせ専用。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

クリアカバー付きベッドサイドレール		JIS 認証取得	
KS-151QT	1本		00170-000598 ￥19,000 (税抜)

※クリアカバーは単体でもお求めいただけます。

※スイングアーム介助バー、サイドグリップとの組み合わせ専用。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

壁ぎわに設置したベッドでも使えるテーブルです。



KF-1930

ベッドサイドテーブル(ガススプリング式)		JIS 認証取得	
KF-1920	アイボリー	00170-000716	￥50,000 (税抜)
KF-1930	ミディアム	00170-000751	￥56,000 (税抜)
KF-1950	ビーチ	00170-000717	￥56,000 (税抜)
KF-1960	チェリー	00170-000718	￥56,000 (税抜)
KF-1970	ウォールナット	00170-000719	￥56,000 (税抜)

●寸法：(幅)90.7×(奥)44.5×(高)61~92.5cm 天板寸法：(幅)90×(奥)40cm

ベッドサイドテーブル(ノブボルト固定式)		JIS 認証取得	
KF-282	アイボリー	00170-000399	￥33,000 (税抜)

●寸法：テーブル本体／(幅)80.8×(奥)45×(高)63~95.5cm(13段階調節可能)  
天板／(幅)80×(奥)40cm

●楽匠プラスシリーズとベッドサイドテーブルの適合表

製品コード	Hタイプ (床高21cm)	Xタイプ		
		脚座が超低床時 (床高15cm)	脚座が低床時 (床高21cm)	オプション脚座セット +ハイトスパーサー (床高22cm)
KF-19*0	△	×	○	○
KF-282	△	×	△	○

※△は高さ調節機能で床高を24cm以上にすれば使用可能です。

レバーを操作するだけで  
高さ調節が行えるテーブルです。



KF-833LB

オーバーベッドテーブル(テーブル移動ロック機構付き)		JIS 認証取得	
KF-833LA	91cm幅	アイボリー	00170-000315 ￥94,000 (税抜)
KF-833LB	91cm幅	ミディアム	00170-000317 ￥106,000 (税抜)
KF-833LC	91cm幅	チェリー	00170-000319 ￥106,000 (税抜)
KF-833SA	83cm幅	アイボリー	00170-000316 ￥94,000 (税抜)
KF-833SB	83cm幅	ミディアム	00170-000318 ￥106,000 (税抜)

●寸法 [KF-833LA、KF-833LB、KF-833LC]  
(幅)133.4×(奥)63.4×(高)63~95cm、支柱内寸法112.5cm、天板寸法：(幅)128.4×(奥)40cm  
[KF-833SA、KF-833SB]  
(幅)119.4×(奥)63.4×(高)63~95cm、支柱内寸法98.5cm、天板寸法：(幅)114.4×(奥)40cm

オーバーベッドテーブル(テーブル移動ロック機構なし)		JIS 認証取得	
KF-832LA	91cm幅	アイボリー	00170-000321 ￥73,000 (税抜)
KF-832LB	91cm幅	ミディアム	00170-000323 ￥85,000 (税抜)
KF-832LC	91cm幅	チェリー	00170-000325 ￥85,000 (税抜)
KF-832SA	83cm幅	アイボリー	00170-000322 ￥73,000 (税抜)
KF-832SB	83cm幅	ミディアム	00170-000324 ￥85,000 (税抜)

●寸法 [KF-832LA、KF-832LB、KF-832LC]  
(幅)133.4×(奥)43.2×(高)63~95cm、支柱内寸法112.5cm、「天板寸法：(幅)128.4×(奥)40cm  
[KF-832SA、KF-832SB]  
(幅)119.4×(奥)43.2×(高)63~95cm、支柱内寸法98.5cm、天板寸法：(幅)114.4×(奥)40cm

オーバーベッドテーブル (ノブボルト調節式)		JIS 認証取得	
KF-813	91cm幅	アイボリー	00170-000387 ￥32,000 (税抜)
KF-814	83cm幅	アイボリー	00170-000372 ￥32,000 (税抜)

●寸法 [KF-813] (幅)121×(奥)40×(高)63~95.5cm(13段階調節可能)、脚部内寸法111.2cm、  
天板寸法：(幅)121×(奥)40cm  
[KF-814] (幅)113×(奥)40×(高)63~95.5cm(13段階調節可能)、脚部内寸法103.2cm、  
天板寸法：(幅)113×(奥)40cm

## オプション

ベッドサイドで、また車椅子と  
組み合わせて使うことができます。



リハビリテーブル				
KF-850	天板ティルト機構	00170-000265	¥90,000 (税抜)	
KF-840	コンパクトサイズ	00170-000489	¥57,000 (税抜)	

- 寸法：[KF-850] (幅)90×(奥)63.4×(高)53~78cm(11段階調節可能)、  
[KF-840] (幅)79×(奥)58×(高)54~79cm(11段階調節可能)
- 天板寸法：[KF-850] (幅)90×(奥)60cm、[KF-840] (幅)79×(奥)50cm

- 楽匠プラスシリーズとリハビリテーブルの適合表

製品コード	Hタイプ (床高21cm)	Xタイプ		
		脚座が超低床時 (床高15cm)	脚座が低床時 (床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスパーサー(床高22cm)
KF-850	△	×	×	○
KF-840	△	×	○	○

※△は高さ調節機能で床高を24cm以上にすれば使用可能です。

自力で座位保持が不安定な方の  
リハビリテーションをサポートします。



端座位保持テーブル		
KF-890	00170-000574	¥128,000 (税抜)

- 寸法：テーブル本体(幅)68×(奥)77×(高)55~80cm(11段階調節)  
背面ユニット使用状態(幅)68×(奥)77~95(8段階調節)×(高)91~116cm  
(テーブル高さ調節と連動)
- 天板寸法：(幅)68×(奥)48cm

- 楽匠プラスシリーズと端座位保持テーブルの適合表

Hタイプ (床高21cm)	Xタイプ		
	脚座が超低床時 (床高15cm)	脚座が低床時 (床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスパーサー(床高22cm)
△	×	○	○

※△は高さ調節機能で床高を24cm以上にすれば使用可能です。

ベッドサイドレールに載せて使用できるテーブルです。



オーバーテーブル			
KQ-060L	91cm幅	00170-000374	¥10,000 (税抜)
KQ-060M	83cm幅	00170-000373	¥10,000 (税抜)

- 寸法：[KQ-060L] (幅)31×(長)99.8cm [KQ-060M] (幅)31×(長)93cm
- ※オーバーテーブルは3モーションシリーズには適合しません。また、ソフトカバー付ベッドサイドレールやソフトガードサイドレール、スイングアーム介助バーのグリップ部ではオーバーテーブルは使用できません。

ベッドサイドレールに載せて使用できるテーブルです。  
91cm、83cm幅の両方のベッドに対応します。



アジャストテーブル			
KQ-090	91cm幅 83cm幅	00170-000188	¥12,000 (税抜)

- 寸法：(幅)32×(長)70~106.2cm
- ※アジャストテーブルは3モーションシリーズには適合しません。また、ソフトカバー付ベッドサイドレールやソフトガードサイドレール、スイングアーム介助バーのグリップ部ではアジャストテーブルは使用できません。

IVボールをベッドのボードに取り付けられる専用ホルダーです。

IVボールホルダー		
KQ-PA0V	00170-001343	¥25,000 (税抜)

ベッドを足側に14cm延長できます。

延長フレーム			
KQ-PA2L	91cm幅	00170-001345	¥40,000 (税抜)
KQ-PA0L	83cm幅	00170-001344	¥38,000 (税抜)

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

延長フレームに載せて使用する延長部専用のマットレスです。

延長マットレス				
KE-L111	91cm幅 厚さ12.5cm	00170-001103	¥22,000 (税抜)	
KE-L121	91cm幅 厚さ9.5cm	00170-001106	¥22,000 (税抜)	
KE-551L	91cm幅 厚さ8cm	00170-000563	¥20,000 (税抜)	
KE-L113	83cm幅 厚さ12.5cm	00170-001104	¥22,000 (税抜)	
KE-L123	83cm幅 厚さ9.5cm	00170-001107	¥22,000 (税抜)	
KE-553L	83cm幅 厚さ8cm	00170-000565	¥20,000 (税抜)	

※非課税のベッドと延長フレームとセットで購入する場合に限り非課税となります。



キャスター(4個セット)ストッパー付き			
JIS 認証取得			
KQ-P70C*1	Hタイプ用	00170-000794	¥25,000 (税抜)
KQ-P90C*2	Xタイプ用	00170-000560	¥20,000 (税抜)

\*1 ベッドの高さが3cm高くなります。

\*2 ベッドの高さは変わりません。

※キャスターを取り付けて、非課税のベッドを購入する場合、ベッド本体は課税となります。



キャスター付ハイトスパーサー(4個セット)ストッパー付き			
JIS 認証取得			
KQ-P90CH	Xタイプ用	00170-000608	¥22,000 (税抜)

※ベッドの高さが6.5cm高くなります。

※キャスター付きハイトスパーサーを取り付けて、非課税のベッドを購入する場合、ベッド本体は課税となります。



ハイトスパーサー(4個セット)			
JIS 認証取得			
KQ-P90H*1	Xタイプ用	00170-000561	¥4,000 (税抜)
KQ-027A*2	Xタイプ用	00170-000562	¥7,300 (税抜)

\*1 オプション脚座セット(KQ-PA0A)と一緒に取り付けると、ベッドの高さが1cm高くなります。

\*2 ベッドの高さが17cm高くなります。

※非課税のベッドとセットで購入する場合に限り非課税となります。

オプション脚座セット			
JIS 認証取得			
KQ-PA0A	Xタイプ用	00170-001342	¥4,000 (税抜)

※ハイトスパーサー(KQ-P90H)を使ってベッドを高くする場合に必要です。

ゆかに敷いて使用する滑り止め用のゴムシートです。

脚座ゴムシート			
KQ-P70K	Hタイプ用	4枚(ベッド1台分)セット	¥1,800 (税抜)
KQ-P732	Xタイプ用	4枚(ベッド1台分)セット	¥1,800 (税抜)

※KQ-P732は、Hタイプのベッドにキャスター(KQ-P70C)を取り付けた場合にもお使いいただけます。

停電時もベッドを操作できる手動のハンドルです。



スマートハンドル[電動ベッド専用 手回し発電機]		
KQ-P70S	オープン価格	
NN-2000	オープン価格	

\*故障内容によっては、スマートハンドルによる操作ができない場合があります。

※高さ(あげ)はできません。

※ご本人様の体重・機種・操作部位などの条件により、操作できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

3モーター組み換えキット		
JIS 認証取得		
KQ-PA0B	2モーターシリーズ用	¥30,000 (税抜)

※藤用モーター ユニットです。2モーターシリーズを3モーターに組み換えられます。

揺れの少ないアルミフレーム製の  
コードレス(充電式)タイプです。

KQ-787



床走行式電動介護リフト			
KQ-787	脚部の開閉 電動式	00170-000858	¥460,000 (非課税)
KQ-781	脚部の開閉 ベダル式	00170-000695	¥405,000 (非課税)

- 寸法：[KQ-787] (全長)130×(全幅)65~102cm 安全使用荷重:205kg 質量:38kg  
[KQ-781] (全長)130×(全幅)65~106cm 安全使用荷重:205kg 質量:38kg

- 楽匠プラスシリーズと床走行式電動介護リフトの適合表

Hタイプ (床高21cm)	Xタイプ		
	脚座が超低床時 (床高15cm)	脚座が低床時 (床高21cm)	オプション脚座セット+ ハイトスパーサー(床高22cm)
○	×	×	○

## 福祉用具貸与事業者様へ

業務サポート

## スマートフォン専用アプリのご案内



パラマウントベッドは福祉用具貸与事業者様専用アプリを通して、レンタル前の事務手続きから、  
使い方動画の閲覧、レンタル後の点検までをサポートします。

### レンタル時に適切な福祉用具を選んでいただくために 福祉用具選定理由の提供

福祉用具の選定理由に関する情報を提供しています。専用アプリ内でレンタルをお考え  
になっている福祉用具のアイコンを選ぶと、想定される選定理由を閲覧いただけます。  
福祉用具サービス計画書などを作成する際に、参考資料としてお役立てください。



### 福祉用具を正しい方法で使用していただくために アプリで閲覧できる使い方動画

楽匠プラスシリーズの使い方を動画で閲覧できます。手元スイ  
ッチのボタンごとに1つの動画で説明しております。納品時の  
説明にお役立てください。




### 福祉用具をより安全に、よりご活用いただくために モニタリング・点検サポート

楽匠プラスシリーズの目視点検項目のリストアップ、プログラムによる電気回路の自動点検、  
点検シートの作成をサポートするプログラムを搭載しています。メンテナンスやレポート作りにお役立てください。

#### 目視点検

点検する方が項目ごとにチェックマークを入  
れながら点検できます。ご自身で点検項目を  
10項目まで追加することができます。

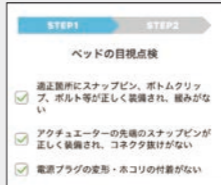

#### 「ベッド点検シート」の自動作成

楽匠プラスシリーズの点検後は「ベッド  
点検シート」を自動作成し、ベッド点検  
結果やベッドの利用状況についてレポ  
ートします。点検シートをプリントすれ  
ば、ケアマネジャーやご家族への情報  
提供に利用できます。



福祉用具貸与事業者様向けの専用アプリは、スマートフォン  
でこちらのQRコードを読み取るとダウンロードできます。  
アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。  
お客様の負担となります。Apple IDや Google アカウントは、  
お客様自身でご確認ください。



※Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービス  
マークです。GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。