

# 家具調トイレ〈座楽〉 ひじ掛けはねあげ

## 介助移乗しやすい タイプ

### 〈主な機能〉

可動  
ひじかけ

選べる  
便座

座面  
前後傾  
調整

強力脱臭

片手で  
切れる  
ペーパー  
ホルダー

後方介助  
スペース

外せる  
防汚トレイ

詳しい機能説明は 42 ページを  
ご参照ください。

新色追加

ミディアムブラウン



ダークブラウン

夜中でも安心  
蓄光シール付き  
※ミディアムブラウンのみ

貼り付け例



介護  
保険

購入対象品目



組立完成品

最大使用者  
体重  
**100kg**

部 品  
一 覧  
→P.132

選定理由  
→P.145

入浴介護

排泄介護



## おすすめポイント！

### 介護現場の声から生まれた新しいカラー！

汚れが目立ちにくそう。  
(手あか)

部屋の中においても  
違和感がありません。



落ち着いた色合いが  
おしゃれ。

これからの家に合いそう。

## ひじ掛けはねあげで

### 1 ひろびろスペースで 移乗や側方介助がラク

ひじ掛けをはねあげれば  
こんなに広々。



手すり・  
移動支援

ベッド・  
マットレス


生活快適

水廻り


選  
定  
理  
由

品名	品番 末尾MB：ミディアムブラウン 末尾なし：ダークブラウン	希望小売価格 (税抜き価格)	質量	JANコード (MB)：ミディアムブラウン ( )なし：ダークブラウン	TAISコード	センサー 脱臭器
脱臭あたか便座	PN-L23418MB PN-L23418	98,000円	22.0kg	(MB) 4549980379165 4549980034057	00980-000308	○
脱臭ソフト便座	PN-L23417MB PN-L23417	90,000円	21.5kg	(MB) 4549980379158 4549980034040	00980-000307	○
脱臭プラスチック便座	PN-L23416MB PN-L23416	86,000円	21.0kg	(MB) 4549980379141 4549980034033	00980-000306	○
あたか便座	PN-L23408MB PN-L23408	75,000円	21.5kg	(MB) 4549980379134 4549980034026	00980-000305	×
ソフト便座	PN-L23407MB PN-L23407	67,000円	21.0kg	(MB) 4549980379127 4549980034019	00980-000304	×
プラスチック便座	PN-L23406MB PN-L23406	63,000円	20.5kg	(MB) 4549980379110 4549980034002	00980-000303	×


●共通寸法図 (cm)

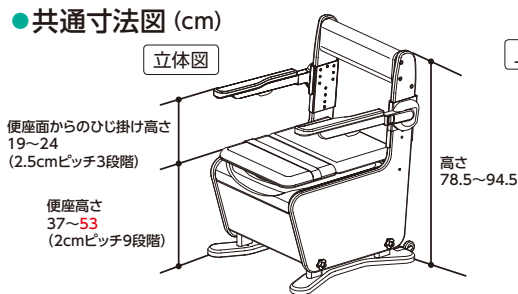

上面図

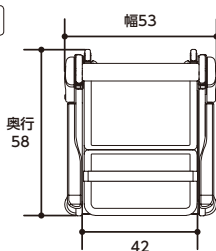

●便座共通寸法図 (cm)

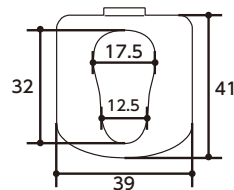

共通商品スペック

- 【付 属 品】●消臭液 (VALTN5B) / 1本  
●便座カバーEタイプ (PN-LTBCRKC) / 1枚  
※あたか便座には付属されておりません  
●ペーパーホルダー
- 【ポット種類】●ポータブルトイレ用バケツ (PN-L53018W)
- 【材 質】●本体：天然木 (ウレタン樹脂塗装)  
●座面・背もたれ：ウレタンフォーム、合成皮革  
●ひじ掛け：鋼材  
●バケツ・防汚トレイ：ポリプロピレン  
●すべり止めゴム：エラストマー  
●キャスター：ポリアミド樹脂  
●プラスチック便座：ポリプロピレン  
●ソフト便座：ウレタンフォーム、合成皮革  
●あたか便座：ポリプロピレン

- 【脱 臭 タ イ プ】●およその電気代：3W 0.1円/日 (1日1時間使用した場合)  
●電源コード長さ：1.8m
- 【あたか便座タイプ】●制御方式：3段階電子制御  
●表面温度：「切」室温、「低」32℃、「中」36℃、「高」40℃  
●安全装置：温度ヒューズ76℃  
●消費電力：45W  
●およその電気代：45W 1円/日 (1日1時間使用した場合)  
●電源コード長さ：1.8m

※新電力料金目安単価：27円 / kWh (税込) で計算。  
※低温やけどのおそれがあります。ご使用時の便座温度にご注意ください。


## 介助しやすい広々スペース。

### 2 自重で落ちない 安心仕様



- 途中で持ち替え可能
- うっかり手を離しても安心

### 3 安心して力を掛けられるひじ掛け

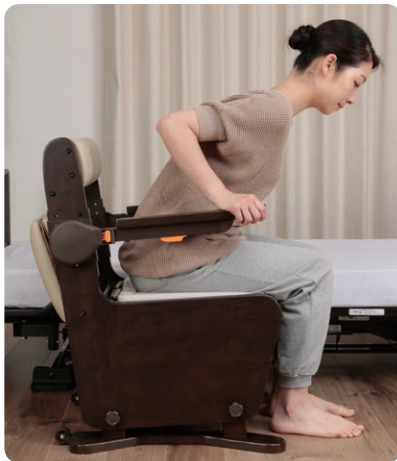

支柱がなくても  
安心の強度



ロックをかければひじ掛けが  
動かないので移動時に便利です。

手すり・  
移動支援

ベッド・  
マットレス

生活快適

水廻り

一選  
定理由