

しんわ通信 11月号

今月のオススメ

新商品のご紹介

①屋外用歩行車「アルコーステラ」

②車いす用電動昇降機 UD-330

③3点杖「もっちートリプル」



NEW

アルコーステラ

折りたたみ プレーキ 駐車プレーキ グリップ サドル座席 介護保険 屋外

アルコブランド初となるスタイリッシュな屋外用歩行車が登場。
日常のあらゆるシーンでの使用を想定した、安心で便利な機能が満載です。
4段階の抵抗調整が可能な新型CONPAL2採用モデルもラインナップ。

3段階の座面高さ調節が可能



座面の高さは、48cm・50.5cm・53cmの3段階に調整が可能。

丈夫で安定感の高い楕円パイプ



安定性の高い楕円パイプフレームの採用で、グラつき・たわみを軽減。

自立可能な折りたたみ方式



自立した状態で折りたたむことが可能だから、収納にとっても便利。
(収納時／幅51cm)

視認性に優れたパーツ配色



【後輪】ティッピングパーツによる歩行時の足への干渉をケア。
【収納バッグ】収納荷物の視認性を向上。

買い物カゴを載せることが可能



スーパーやコンビニなどで座面の上に買い物カゴを載せることが可能。
(脱着防止フック付)

買い物袋を掛けられるフック付き



グリップ前方のフックには買い物袋をかけることが可能。

屋内での使用時に便利なトレイ



屋内での使用の際、配膳などに便利なオプショントレイを搭載。
*トレイ付き仕様のみ

サイズ

幅52.9cm × 奥行64.1cm

高さ

77.2cm ~ 88.9cm

座面高

48cm ~ 53cm

折りたたみ幅

51cm (自立可)

材質

アルミニウム

最大使用者体重

80kg



介護福祉
福祉用具
賞与
適応商品

made
in
JAPAN

車椅子用電動昇降機

UD-330

最大650mmの段差対応

2本の昇降マストにより、揺らぎを低減
お一人で分解・組立が簡単にできます。
敷地や用途に合わせて直進乗り込みにも
L字乗り込みにも対応できます。



おすすめポイント 車いす用電動昇降機 UD-330

門型形状マスト

- Point 1**
2本の昇降マストにより揺らぎを低減します。
- Point 2**
L字乗り込みの場合、駆動部の間に車いすのフトサポートを入れることで前進方向から乗り込むことが可能です。




ガード・ガイドボールカバー

- Point 1**
車いす落下防止ガードで脱輪を防ぎます。
- Point 2**
ガイドボールにカバーを採用しました。ボールを守り、ネジの緩みを防止します。



レバー操作が簡単

- Point 1**
レバー操作を本体内側に収め、設置時に段差側の開口寸法に影響しなくなりました。
- Point 2**
レバーを大きくすることでどこからでも操作しやすい設計になりました。

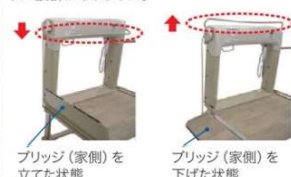

挟み込み防止機能

- Point**
テーブルの下面に障害物があると下降を停止します。



仕様	全高：965～1,560mm	全高：965～1,560mm	昇降時間：50Hz=52秒/60Hz=43秒	電源：AC100V 50/60Hz
全長（ブリッジ起立状態）：直進1,500mm L字1,230mm	ブリッジ寸法：幅685mm×長さ275mm	ブリッジ寸法：幅685mm×長さ275mm	スロープ角度：7°	消費電力：110w
全幅：直進930mm L字（スロープを下げた状態）1,215mm	スロープ寸法：直進 幅695mm×長さ295mm L字 幅1075mm×長さ295mm	スロープ寸法：直進 幅695mm×長さ295mm L字 幅1075mm×長さ295mm	テーブル内寸：1140×715mm	介助者同乗：不可
昇降範囲：55～650mm	昇降範囲：55～650mm	昇降範囲：55～650mm	本体重量：98kg	主要素材：スチール・ステンレス
			耐荷重：150kg	※電源コード4m付



MAKI 株式会社 マキテック



NEW ステッキ もっちートリプル

もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらに優しい杖です。



サスペンション機能
スプリングが入っており、衝撃を吸収。歩行時にアシストします。



グッドギア装着
3点接地で安心。



シリコングリップ
もちもち触感のやわらかグリップで手が疲れにくいです。

仕様

カラー	ー：ブラック、ブルー、ワインレッド
長さ	さ：73.5～96cm 10段階調節(2.5cm間隔)
脚部	幅：約9.5cm
杖先	ム：GGG-3/P60
重量	量：約450g
主材	質：支柱(アルミ)、グリップ(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)



株式会社 新和メディカル

担当：

携帯：

□ 福岡営業所	〒811-1314	福岡県福岡市南区的場1丁目27-4
□ 福岡西営業所	〒819-0052	福岡市西区下山門1-20-4 3号室
□ 福岡東営業所	〒811-0201	福岡県福岡市東区三苫5丁目4-30
□ 北九州営業所	〒807-1131	北九州市八幡西区馬場山東2-9-9
□ 武雄営業所	〒843-0023	佐賀県武雄市武雄町昭和109番地
□ 佐世保営業所	〒859-3216	長崎県佐世保市勝海町278番2
□ 諫早営業所	〒854-0053	長崎県諫早市小川町792-3
□ 大村営業所	〒856-0826	長崎県大村市東三城町7-19 1F
□ 長崎営業所	〒851-2121	長崎県西彼杵郡長与町岡郷551-5

TEL 092-502-7244	FAX 092-502-7245
TEL 092-836-8852	FAX 092-836-8853
TEL 092-692-8715	FAX 092-692-8716
TEL 093-618-8772	FAX 093-618-8773
TEL 0954-23-3605	FAX 0954-22-2247
TEL 0956-76-8236	FAX 0956-76-8237
TEL 0957-47-6618	FAX 0957-47-6628
TEL 0957-47-9998	FAX 0957-47-9946
TEL 095-865-6883	FAX 095-865-6882